



We care for healthy smiles

Patiëntfolder



We care for healthy smiles

TePe Interdentale raggers



Origineel

	0,4 mm	1574 2970	<input type="checkbox"/>
	0,45 mm	1574 2946	<input type="checkbox"/>
	0,5 mm	1574 2962	<input type="checkbox"/>
	0,6 mm	1574 2911	<input type="checkbox"/>
	0,7 mm	1529 1847	<input type="checkbox"/>
	0,8 mm	1529 1855	<input type="checkbox"/>
	1,1 mm	1574 2954	<input type="checkbox"/>
	1,3 mm	1574 2938	<input type="checkbox"/>
	1,5 mm	1574 2989	<input type="checkbox"/>
	Gemengd	1574 2903	<input type="checkbox"/>



Extra soft

	0,45 mm	1590 5047	<input type="checkbox"/>
	0,5 mm	1590 5055	<input type="checkbox"/>
	0,6 mm	1590 5071	<input type="checkbox"/>
	0,7 mm	1590 5098	<input type="checkbox"/>
	0,8 mm	1590 5101	<input type="checkbox"/>
	1,1 mm	1590 5128	<input type="checkbox"/>
	Gemengd	1590 5136	<input type="checkbox"/>



Angle

	0,4 mm	1565 4427	<input type="checkbox"/>
	0,45 mm	1565 4400	<input type="checkbox"/>
	0,5 mm	1565 4419	<input type="checkbox"/>
	0,6 mm	1565 4370	<input type="checkbox"/>
	0,7 mm	1565 4389	<input type="checkbox"/>
	0,8 mm	1565 4397	<input type="checkbox"/>
	Gemengd	1565 4362	<input type="checkbox"/>

TePe Floss

Bridge & Implant

Floss 1586 5495



Dental Floss 1564 9660



TePe Aanvullende producten

Gingival Gel 1576 0316



PlaqSearch 1586 5509



TePe Specialistische borstels

Implant Care 1562 2215



Implantaat/orthodontie
borstel 1529 1421



Compact Tuft 1529 1448



Interspace, x-soft
1586 0884



Interspace, soft
1586 0876



Interspace, medium
1586 0868



TePe Tandенborstels

Select, soft 1529 1235



Select, x-soft 1529 1227



Select Compact
soft 1529 1316




Select Compact
x-soft 1529 1294



Supreme 1529 1189



Implantaat verzorging

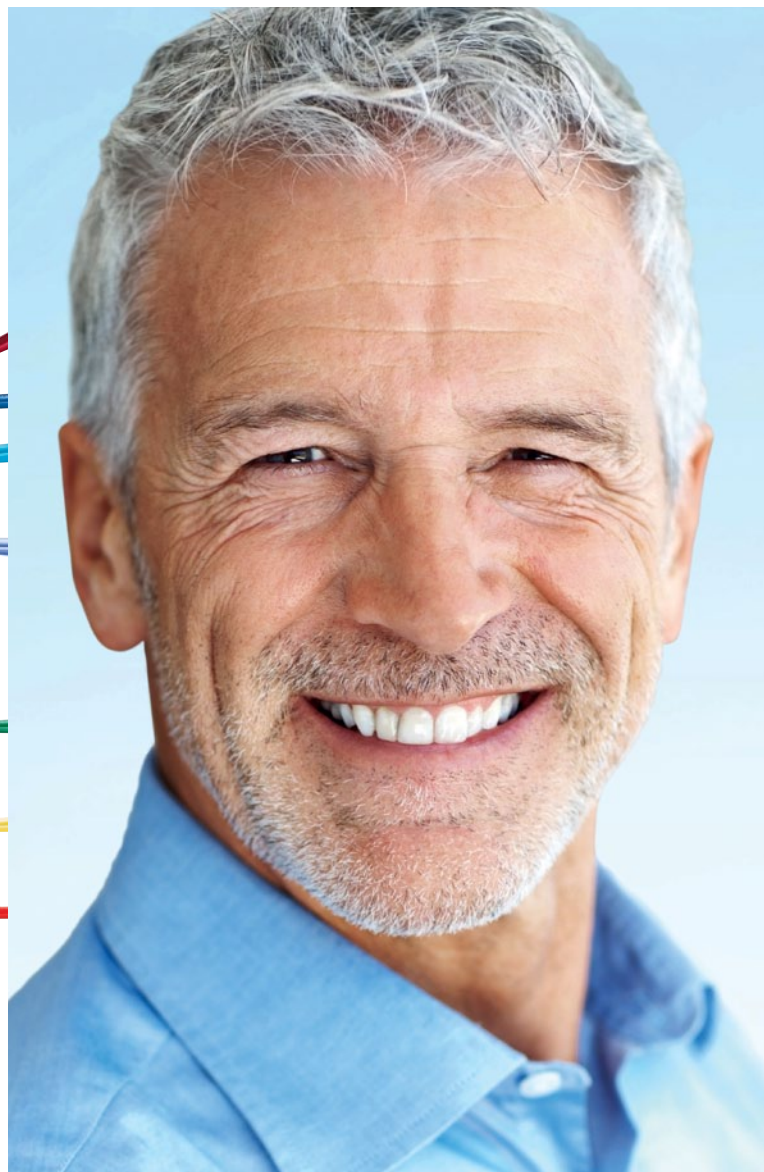

TePe Mondhygiëne Producten B.V.

Parmentierweg 6, 2316 ZM Leiden
Tel: 071 751 18 60 • Fax: 071 751 18 59
info.nl@tepe.com • www.tepe.com

Made in Sweden,
used worldwide.

Zorg net zo goed voor uw implantaat als u zou doen voor uw natuurlijke tanden. Om ziektes rondom het implantaat te voorkomen is een goede mondhygiëne belangrijk. Met de juiste verzorging thuis en regelmatige professionele controles, gaan uw 'nieuwe' tanden een leven lang mee.



Wat is peri-implantitis?

Osseointegratie = verankering van het implantaat in het omliggende bot

Peri-implant mucositis = ontstoken tandvles rondom implantaten

Peri-implantitis = ontstoken tandvles en verlies van bot rondom implantaten

Gezond tandvles




Gezond tandvles doet geen pijn en bloedt niet wanneer u rondom uw implantaten reinigt.


Peri-implantitis mucositis



Wanneer er ontstekingen rondom de implantaten zijn spreekt men van peri-implant mucositis. Deze ziekte veroorzaakt roodheid en zwellingen, maar is niet altijd even duidelijk zichtbaar. Uw tandvles kan gevoelig zijn en kan gaan bloeden wanneer u rondom het implantaat reinigt.

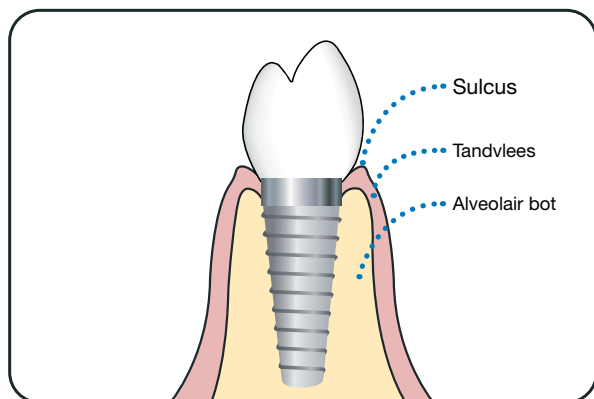


Het implantaat is ingegroeid in het bot (osseointegratie). Het tandvles bedekt het bot en ligt als een kraag rondom het implantaat. De smalle ruimte tussen het implantaat en het tandvles wordt de gingivale sulcus genoemd.

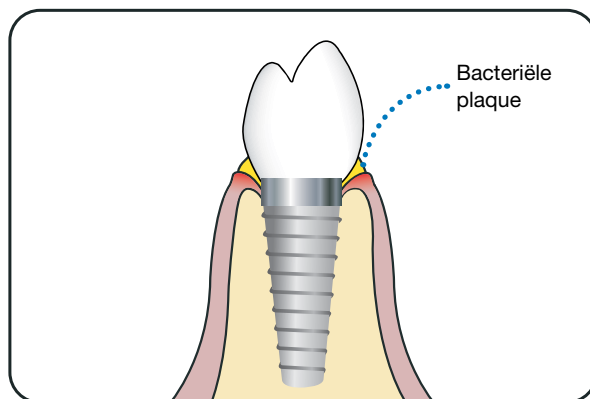


Bacteriële plaque is een kleverige laag die zich continue vormt op uw tanden en implantaten. Als dit niet goed wordt schoongemaakt kan plaque zich ophopen en zodoende peri-implant mucositis veroorzaken.

Peri-implantitis

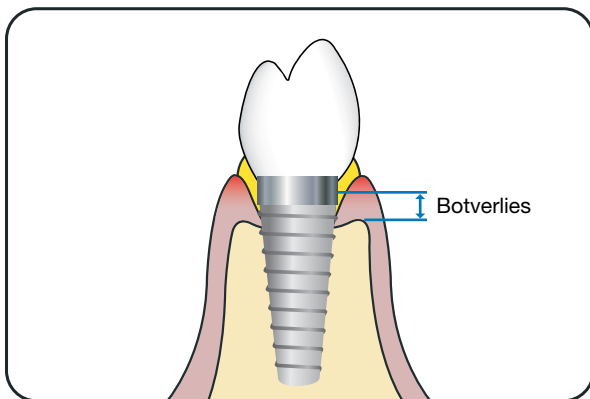

Als de plaque niet wordt verwijderd zal deze achterblijven in de sulcus, waar het onmogelijk is om met een tandenborstel of interdentaal rager te komen. De plaque verhardt tot tandsteen wat door het ruwe oppervlak weer meer plaque aantrekt. Als het bot langzaam oplost verliest de tand steeds meer houvast. Peri-implant mucositis heeft zich dan ontwikkeld tot peri-implantitis.

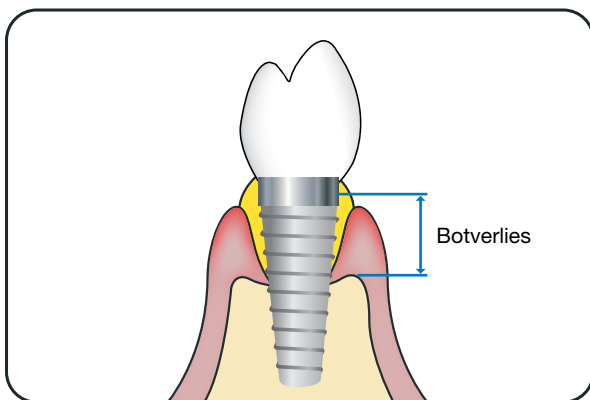

Deze ziekte is pijnloos en wordt vaak niet opgemerkt. Daarom is het verkrijgen van een professionele behandeling belangrijk om zodoende het proces te stoppen. Zonder behandeling zal het botverlies voortduren en kan zelfs het implantaat losraken van het bot. Factoren die het risico op peri-implantitis kunnen verhogen zijn een slechte mondhygiëne, roken en erfelijkheid.



Voorkomen en behandelen

Peri-implant ziektes kunt u met een goede mondhygiëne voorkomen. Roodheid, zwelling en bloedend tandvlees tijdens het poetsen zijn signalen van ontstekingen. Deze signalen kunnen echter niet altijd even duidelijk zijn.

Neem contact op met uw tandarts/mondhygiënist indien u enige ontstekingen vermoedt. Een professionele behandeling omvat een intensieve reiniging en het verwijderen van tandplaque en tandsteen. Verder leert u hoe thuis om te gaan met het verzorgen van uw implantaten.

Uw tandarts/mondhygiënist kan u helpen bij een goede mondhygiëne. Om het terugkeren van de ziektes te voorkomen, zijn regelmatige controles en een goede verzorging thuis belangrijk.

Reiniging van implantaten




Er zijn verschillende types implantaten die elk een andere verzorging vereisen. TePe heeft een ruim assortiment tandborstels die de verzorging thuis vergemakkelijken. De tandarts helpt u graag bij het kiezen van het juiste product voor uw speciale wensen.

Implantaat ondersteunende brug




Tandenborstels

Kies voor de onregelmatige vlakken van een implantaat een tandenborstel die overal makkelijk bijkomt, bv. de TePe Select™ Compact, met een kleine borstelkop. De TePe Supreme™ heeft borstelharen op twee niveaus; de langere haren reiken verder tussen de implantaten.

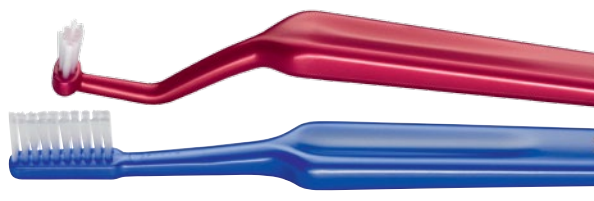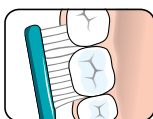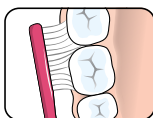

Speciale borstels

U kunt een speciale borstel nodig hebben voor de gebieden waar het implantaat in contact komt met het tandvlees. De TePe Implant Care™ heeft een gehoekte nek voor de binnenzijde van het implantaat. De TePe implantaatborstel heeft een smalle borstelkop waarmee gemakkelijk de buitenzijde van het implantaat gereinigd kan worden.

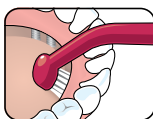

Implantaat ondersteunende brug = meerdere tanden worden vervangen door een brug verankerd op implantaten. Uit cosmetisch oogpunt kan ook artificeel tandvlees deel uit maken van de brug.




Enkel implantaat = een kroon verankerd op een implantaat.

Prothese op implantaten = een uitneembare prothese verankerd op implantaten met een klik-systeem.





Single-tufted borstels

Een single-tufted borstel is ideaal voor nauwkeurige reiniging of voor moeilijk bereikbare plaatsen. De TePe Compact Tuft™ heeft een stompe compacte borstelkop. De TePe Interspace™ heeft een puntige tip en een verwisselbare borstelkop. Keuze uit extra soft (rood), soft (geel) of medium (wit) borstelharen.

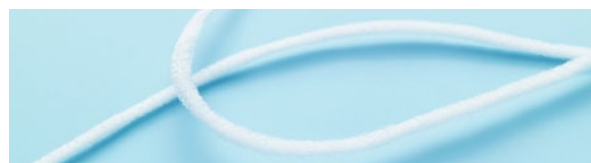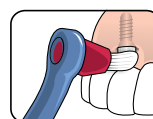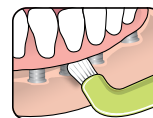

Floss

De TePe Bridge & Implant Floss is gemaakt van elastisch materiaal wat het ideaal geschikt maakt voor gebruik in de nauwe interdentale ruimtes. Maakt tegelijkertijd de zijden van het implantaat, als ook de ruimtes schoon waar de implantaatconstructie het tandvlees raakt.

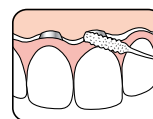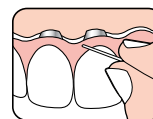

Interdentale ragers

Met de tandenborstel reinigt u de voor- en achterzijde van een implantaat. Om alle overige zijden te kunnen bereiken wordt het gebruik van een interdentale rager aanbevolen. TePe interdentale ragers zijn verkrijgbaar in verschillende maten, hoeken en borstelhaarstructuren. Het handvat heeft een comfortabele grip en voor veilig gebruik zijn alle maten voorzien van een plastic gecoate metalen draad.




TePe Interdentale ragers, origineel



TePe Interdentale ragers, extra soft
Geschikt voor gevoelige tandhalzen.



TePe Angle™ is een interdentale rager met een gehoekte nek voor een perfecte toegang en een lang, plat handvat voor gemakkelijk gebruik.

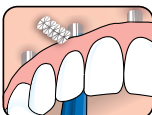

Enkel implantaat

Gebruik een reguliere tandenborstel voor het reinigen van tanden en implantaten. Extra aandacht vergen de gebieden daar waar het implantaat in aanraking met het tandvlees komt.




Dental floss

Voor het reinigen van implantaten kan Dental Floss uitermate geschikt zijn. Kies tussen de dunne TePe Dental Floss of de iets bredere TePe Bridge & Implant Floss. Kies voor een interdentale rager als de interdentale ruimtes wat groter zijn. Het kan zijn dat een extra borstel nodig is om de implantaten te reinigen. Vraag uw tandarts/mondhygiënist hiernaar.




Overkappingsprothese

Met een uitneembare prothese heeft u een goede toegankelijkheid en zicht. Hierdoor wordt het reinigen makkelijker gemaakt.

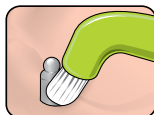



Single-tufted borstel

De TePe Compact Tuft is ideaal geschikt voor het reinigen rondom verschillende soorten pijlerelementen.

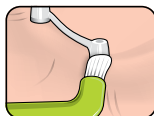


Interdentale ragers

Gebruik een interdentale rager voor het reinigen onder de steg.

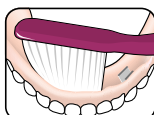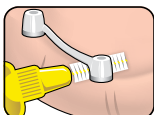

Protheseborstel

Gebruik een TePe Protheseborstel met lange en extra sterke borstelharen voor het efficiënt reinigen van een overkappingsprothese.

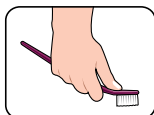


Voor een betere grip; buig de nek van de borstel achterover, na opwarmen onder heet water.

Controleer uw poetstechniek

Plaque is lastig te zien, zeker wanneer deze zich tussen en aan de binnenkant van het implantaat en de tanden bevindt. Met TePe PlaqSearch™ kunt u op een eenvoudige manier controleren of alle ruimtes goed zijn gereinigd. TePe PlaqSearch kleurt oude en nieuwe plaque, waardoor het duidelijk wordt waar de aandachtsplekken zich bevinden. Vraag uw tandarts/mondhygiënist hiernaar.



Rood toont nieuwe plaque en blauw toont oude plaque.

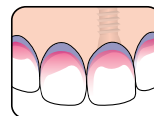


Effectieve plaque controle

De TePe Gingival gel is antibacterieel en heeft een antiplaque effect, wat helpt een tandvleesontsteking te voorkomen. Wanneer de ontsteking hardnekkig is, wordt vaak voor een korte periode gel als aanvulling op het poetsen gebruikt. De gel heeft een frisse mintsmaak en bevat geen alcohol of schuurmiddelen. Het is gemakkelijk aan te brengen met een interdentale rager of een tandenborstel.



Druppel de gel op de interdentale rager...

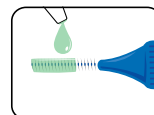

...of gebruik de dop als een bakje om de gel aan te brengen.




Zorg dat uw implantaten een leven lang meegaan

Zorg goed voor uw implantaten en behandel ze net zoals u, uw eigen tanden zou verzorgen. Besteedt extra aandacht aan de gebieden waar het implantaat in contact komt met het tandvlees. Als deze gebieden plaquevrij worden gehouden, is de kans groot dat uw implantaten een leven lang zullen meegaan.

Uw tandarts/mondhygiënist kan u vertellen welke producten en reinigingstechnieken het beste bij u en uw implantaat passen.

Uw implantaten:

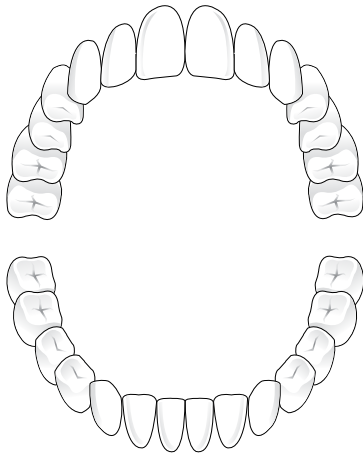

Vraag uw tandarts/mondhygiënist waar uw implantaten zijn geplaatst.

